

Začínáme

Krok 1

Zapněte a nechte pracovat

Silně stiskněte středové tlačítko a nechte PRO plout po oblastech, které vyžadují nejvyšší pozornost. Rychlost upravíte stisknutím tlačítek **(+)** a **(-)**. Nevývíjejte příliš silný tlak.

Krok 2

Stáhněte si aplikaci Theragun

Provedeme vás bezstarostně nastavením a ukážeme, jak dostat z vašeho Theragunu PRO maximum.


Krok 3

Pocíťte ten rozdíl. Každý den.

Zhluboka se nadechněte a poskytněte si ošetření s přednastaveným programem nebo freestyle, vše je vytvořené přímo pro vás s průvodcem v aplikaci.

Theragun PRO


- A** OLED displej
- B** Ovládací tlačítka
- C** Multi-úchopová rukojeť
- D** Li-ion baterie
- E** Tlačítko pro odjištění baterie
- F** Tlačítko pro odjištění polohy ramene
- G** Polohovatelné rameno
- H** Vyměnitelné nástavce

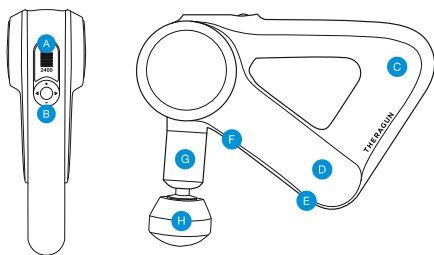

Přečtěte si přiložené bezpečnostní instrukce.


Použití Theragunu PRO

1. Před zapnutím vložte do Theragunu PRO baterii.
2. Silným stisknutím středového tlačítka zapnete přístroj Theragun PRO.
3. Pro zvýšení či snížení rychlosti ošetření použijte tlačítka **(+)** a **(-)**. (rozmezí 1750 - 2400 ot./min.).
4. Pro přepínání mezi přednastavenými programy přístroje Theragun PRO použijte tlačítka **(<)** a **(>)**.
5. Přístroj vypnete silným stisknutím a podržením středového tlačítka. Tlačítko držte stlačené dokud se Theragun PRO nevypne.

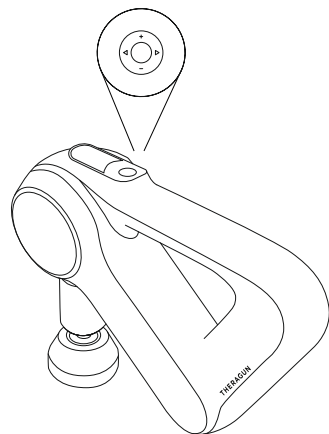


Nasazení a sundání nástavců

Nasměrujte nástavec k zakončení ramene, otočte nástavec tak, aby tvar koncovky ramene korespondoval s tvarem prohlubně v nástavci. Nasadte zatlačením, díly do sebe zacvaknou. Nástavec sundáte uchopením plastové objímky nástavce a vytáhnutím (viz. obrázek).

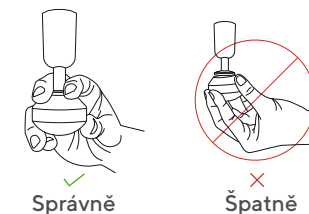

Použití polohovatelného ramene

Theragun PRO umožňuje nastavení 4 poloh ramene. Pro úpravu polohy stiskněte tlačítko na spodní straně přístroje a otočte rameno do požadované polohy.

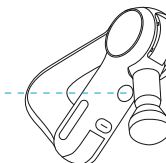

Nástavce

Váš Theragun PRO přichází s 6 nástavci. Každý je speciálně navržený na jiné svalové skupiny a způsoby použití.



Li-ion baterie

Připravte baterii k otvoru na spodní straně přístroje, plochou částí zakončení baterie směrem ke kulatému tlačítku. Zasuňte baterii do přístroje.

Zbývající výdrž baterie se při zapnutí přístroje zobrazí na OLED displeji.

Pro vyjmutí baterie stiskněte kulaté tlačítko u otvoru na baterii a baterii vytáhněte.

Nabíječka


Zapojte kabel do zdířky na nabíječce. Vložte baterii a zatlačte dokud nezačne blikat kontrolka nabíječky. Baterie je nabitá, když kontrolka svítí nepřerušovaně.

U přístroje Theragun PRO je možnost bezdrátového nabíjení.
Pro více informací o navštivte www.rehasport.cz

Smart vlastnosti

Theragun PRO je smart zařízení, které umožňuje připojení přes Bluetooth. Díky tomu se snadno propojí s aplikací Therabody. Po stažení vás aplikace provede krok za krokem nastavením a ukáže vám, jak spárovat aplikaci s vašim PRO.

Jakmile máte přístroj spárovaný, můžete pomocí telefonu upravit rychlost, aktivovat přednastavené programy ošetření a na základě vašeho používání dostanete doporučení šité na míru. OLED displej je doplněk aplikace a pomocník při průvodcovaném ošetření. Zobrazuje aktuální rychlost a sílu.

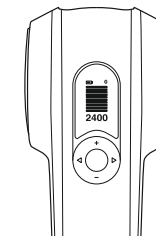

Naskenujte QR kód a začněte.