

Začínáme

Krok 1

Zapněte a nechte pracovat

Silně stiskněte středové tlačítko a nechte Prime plout po oblastech, které vyžadují nejvyšší pozornost. Rychlost upravíte stisknutím šipek (**▲**) a (**▼**). Nevyvíjejte příliš silný tlak.

Krok 2

Stáhněte si aplikaci Theragun

Provedeme vás bezstarostně nastavením a ukážeme, jak dostat z vašeho Theragunu Prime maximum.


Krok 3

Pocíťte ten rozdíl. Každý den.

Zhluboka se nadechněte a poskytněte si ošetření s přednastaveným programem nebo freestyle, vše je vytvořené přímo pro vás s průvodcem v aplikaci.

Theragun Prime


- A** LED indikátor baterie
- B** LED indikátor rychlosti
- C** Ovládací tlačítka
- D** Multi-úchopová rukojeť
- E** Port k připojení nabíječky
- F** Vyměnitelné nástavce

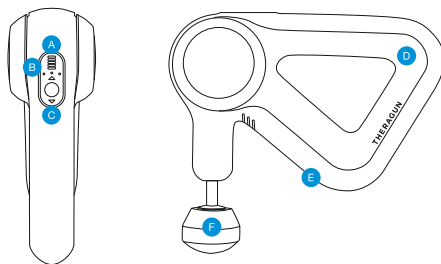

Přečtěte si přiložené bezpečnostní instrukce.


Použití Theragunu Prime

1. Silným stisknutím středového tlačítka zapnete přístroj Theragun Prime.
2. Pro přepínání mezi 5 přednastavenými rychlostmi použijte šipky (**▲**) a (**▼**).
3. Přístroj vypnete silným stisknutím a podržením středového tlačítka.

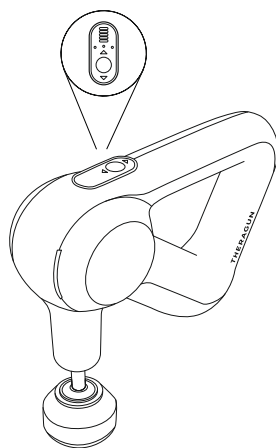


Nasazení a sundání nástavců

Nasměrujte nástavec k zakončení ramene, otočte nástavec tak, aby tvar koncovky ramene korespondoval s tvarem prohlubně v nástavci. Nasadte zatlačením, díly do sebe zacvaknou. Nástavec sundáte uchopením plastové objímky nástavce a vytáhnutím (viz. obrázek).

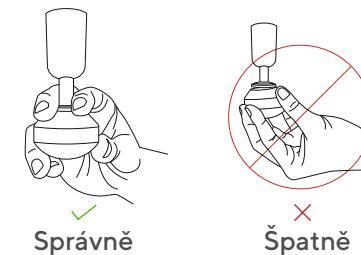


Nástavce

Váš Theragun Prime přichází se 4 nástavci. Každý je speciálně navržený na jiné svalové skupiny a způsoby použití.

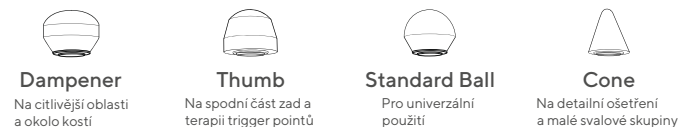

Nabíjení Theragunu Prime


1. Vypněte přístroj Theragun Prime a připojte nabíječku do portu na spodní straně přístroje.
2. LED indikátor baterie začne blikat. Indikátor je umístěný pod světelnou stupnicí 5 rychlostí.
3. Nabíjení je dokončeno, když svítí nepřerušovaně všechny 3 LED indikátory stavu baterie.

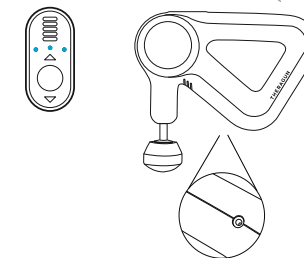

Smart vlastnosti

Theragun Prime je smart zařízení, které umožňuje připojení přes Bluetooth. Díky tomu se snadno propojí s aplikací Therabody. Po stažení vás aplikace provede krok za krokem nastavením a ukáže vám, jak spárovat aplikaci s vaším Prime.

Jakmile máte přístroj spárovaný, můžete pomocí telefonu upravit rychlost, aktivovat přednastavené programy ošetření a na základě vašeho používání dostanete doporučení šité na míru. OLED displej je doplněk aplikace a pomocník při průvodcovaném ošetření. Zobrazuje aktuální rychlost a sílu.

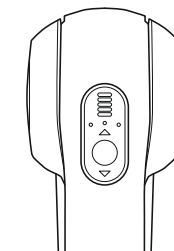

Naskenujte QR kód a začněte.