


Přečtěte si přiložené bezpečnostní instrukce.

Wave Roller™

Smart Vibrační masážní válec od tvůrců Theragunu.

- A** Tlačítka na přidávání a ubírání rychlosti
- B** LED kontrolka stavu baterie
- C** LED indikátor rychlosti
- D** Zdířka připojení nabíječky

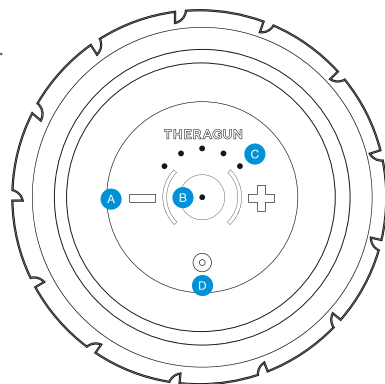

Použití Wave Rolleru™

1. Zapněte Wave Roller silným stisknutím a podržením tlačítka po dobu 1-2 sekund.
2. Wave Roller se spustí na nejnižší z pěti rychlostí. Rychlost zvýšíte krátkým stisknutím tlačítka + až do požadované rychlosti.
3. Umístěte válec pod ošetřovanou oblast, postupně vyvíjejte jemný až střední tlak dle potřeby.
4. Vypněte Wave Roller silným stisknutím tlačítka, držte stlačené dokud se válec nevypne.

Smart vlastnosti

Váš Wave Roller je zařízení se smart technologií umožňující připojení přes Bluetooth, vytvořený k jednoduchému propojení s aplikací Therabody. Aplikace Vás provede spárováním krok za krokem.



Nascanujte QR kód a začněte.



Nabíjení Wave Rolleru™

1. Vypněte válec a připojte nabíječku.
2. LED kontrolka stavu baterie bliká dokud není baterie plně nabitá.
3. Nabíjení je dokončeno jakmile LED kontrolka baterie svítí zeleně.
4. Stav baterie je u zapnutého válce zobrazen LED kontrolkou. Pokud chcete zobrazit stav baterie vypnutého válce, stiskněte krátce tlačítko pro zapnutí a LED kontrolka ukáže stav baterie.

Úroveň baterie se na válci zobrazuje následujícími barvami:

- **Blikající červená:** Nízké nabití
- **Blikající modrá:** Poloviční nabití
- **Blikající zelená:** Vysoké nabití
- **Nepřerušovaná zelená:** Plné nabití

THERAGUN

Wave Roller

NÁVOD NA POUŽITÍ



Výrobce: Theragun, LLC, USA

Vibrační terapie, masážní přístroj

Kód produktu: WAVEROLLER-PKG-EU

Balení obsahuje:

Wave Roller, ochranný cestovní vak, nabíječku

Specifikace

- 5 volitelných rychlostí pro přizpůsobené ošetření
- Připojitelnost přes Bluetooth
- Nepřetržitý provoz baterie 3 hodiny
- Povrch z hypoalergenní EVA pěny
- Možnost bezdrátového nabíjení
- Hmotnost: 1,5 kg
- Rozměry: 30 cm x 13 cm
- Záruka: 2 roky
- Dostupný doplňkový sortiment: Multi-přístrojová bezdrátová nabíječka

ULOŽTE SI TYTO POKYNY PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ

Pro více informací o produktech značky Theragun navštivte: www.rehasport.cz/theragun.

Pro více informací o praktickém využití si stáhněte [Therabody App](#) na App Store či Google Play.



Distributor: REHASPORT TRADE s.r.o.
www.rehasport.cz, tel: 800 200 900



Wave Roller je důkladně konstruovaný tak, aby poskytl co nejsilnější a nejefektivnější uvolnění ať už jste v pohodlí domova, nebo v posilovně. Tento inteligentní vibrační masážní válec disponuje připojitelností přes Bluetooth a nabízí možnost volby z 5 stupňů intenzity, které Vám umožní přizpůsobit ošetření jak na rozehrátí svalů, tak na regeneraci podle Vašich potřeb a pohodlně prostřednictvím mobilní aplikace Therabody.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte Wave Roller na hlavu nebo v oblasti genitálií. Nepoužívejte v oblasti břicha a pasu u těhotných žen. Nepoužívejte zapnutý válec přes ohryzek nebo krční obratel C4. Nenamáchejte Wave Roller. Čistěte jej houbičkou nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nepokoušejte se o rozložení přístroje. Neskladujte Wave Roller při teplotách nad 40°C. Nabíjejte při teplotě v rozmezí 0°C-40°C. Nevystavujte Wave Roller ani jeho nabíječku vodě. Pro dlouhodobé skladování by měl být Wave Roller plně nabitý. Tento produkt není určen k odborné diagnóze, léčbě, ani prevenci onemocnění.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ČI NABITÍM Wave Rolleru SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY V TOMTO MANUÁLU, NA NABÍJEČCE A NA PŘÍSTROJI.

NOVÝ PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT NABIT PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:

Wave Roller™ je vhodný jak ke komerčnímu, tak k domácímu použití. Snažíme se, aby byl Wave Roller co nejbezpečnější. Jedná se však o moderní mechanické zařízení s elektrickými součástkami. Pokud nejsou Wave Roller a jeho součásti používány či udržovány správně, hrozí nebezpečí vzplanutí, elektrického výboje a zranění. Při používání válce je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, a to:

1. POUŽÍVEJTE PODLE NÁVODU. Používejte Wave Roller pouze tak, jak je popsáno v návodu. Používejte pouze s doporučeným příslušenstvím. Neprovádějte žádnou údržbu, která není uvedena v tomto provozním manuálu nebo stanovená společností Therabody.

2. NEVHODNÉ PRO DĚTI. Wave Roller ani jeho nabíječka nejsou určeny pro použití malými dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud není jeho používání pod vedením a dohledem odpovědné osoby, která zajistí bezpečné nabíjení a používání přístroje. Nedovolte, aby byl Wave Roller používán jako hračka. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud přístroj používáte v přítomnosti dětí, nebo když jej děti používají. Děti by měly být pod dohledem, abyste se ujistili, že si nebudou s Wave Rollerem nebo jeho nabíječkou hrát.

3. UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNIŽILI RIZIKO PORANĚNÍ, NABÍJEJTE POUZE NABÍJEČKOU URČENOU PRO WAVE ROLLER. Jiné typy a značky nabíječek mohou způsobit zranění nebo poškození přístroje. Nepřipojujte Wave Roller do napájecí zástrčky či zapalovače cigaret v autě. Vestavěná baterie se tím může trvale poškodit nebo zničit. K bezdrátovému nabíjení používejte pouze nabíječku určenou pro Wave Roller.

4. NABÍJECÍ MÍSTA. Wave Roller by měl být nabíjen pod střechou a v dobře větraném a suchém prostředí. Nenabíjejte venku, v koupelně nebo do vzdálenosti 3 m od vany, umyvadla nebo bazénu. Nepoužívejte Wave Roller nebo nabíječku na mokřím povrchu a nevystavujte je vlhkosti, dešti ani sněhu. Nepoužívejte v přítomnosti výbušných složek (při použití by mohly vzniknout jiskry, zvýšené riziko požáru).

5. NABÍJENÍ. Nevytahujte nabíječku ze zásuvky za kabel, snižte tím riziko poškození elektrické zásuvky a kabelu. Nepřenášejte nabíječku za kabel. Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami. Nepoužívejte nabíječku, pokud je kabel poškozen. Poškozenou nabíječku okamžitě vyměňte. Neroztahujte kabel a nevystavujte jej tlaku. Umístujte kabel mimo vyhřívané plochy. Nemanipulujte s nabíječkou, její koncovkou nebo přístrojem pokud máte vlhké ruce. Nabíjejte pouze AC Adaptérem: EA1046SAR nebo multi-přístrojovou nabíječkou Theragun.

6. ODPOJTE NABÍJEČKU. Pokud nabíječku právě nepoužíváte, odpojte ze zásuvky. Ujistěte se, že je kabel nabíječky umístěn tak, aby nebyl vystaven poškození nebo tlaku.

7. NEPŘEBÍJEJTE BATERII. Nenechávejte Wave Roller připojen k nabíječce déle než hodinu po úplném nabití. Přebíjení zkracuje životnost baterie.

8. NIKDY NEZAPALUJTE Wave Roller. Vestavěná baterie může explodovat a způsobit vážná zranění. Při spalování vznikají toxické výpary a plyny.

9. NENIČTE. Nepoužívejte přístroj nebo nabíječku, která byla vystavena prudkému úderu, přejetí vozem, spadla nebo byla jinak poškozena.

10. CHEMIKÁLIE Z BATERIÍ ZPŮSOBUJÍ VÁŽNÉ POPÁLENINY. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou, očima nebo ústy. Pokud z poškozené baterie vytékají chemikálie, použijte k manipulaci gumové nebo neoprenové rukavice. Pokud je pokožka vystavená tekutinám z baterie, umyjte ji mýdlem a vodou a opláchněte octem. Pokud dojde ke kontaktu s očima, okamžitě je začněte vyplachovat tekoucí vodou minimálně 20 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv odstraňte a zlikvidujte.

11. NEPOUŽÍVEJTE POD PŘIKRÝVKOU. Při použití může dojít k nadměrnému zahřátí a nebezpečí vzniku požáru, poranění elektrickým proudem a jiného zranění.

12. USKLADNĚNÍ. Skladujte na chladném, suchém místě při teplotě 0-40°C. Neskladujte Wave Roller ani nabíječku na místech, kde mohou teploty překročit 40°C - na přímém slunci, v autě, v železných budovách a prostorech během léta.

13. LIKVIDACE. Vestavěné Li-ion baterie jsou šetrnější k životnímu prostředí než jiné typy baterií. Vždy likvidujte podle platných předpisů a regulací Ministerstva životního prostředí a na místech k tomu určených. I vybitý přístroj obsahuje určité množství energie. Před likvidací zalepte konektor elektrickou izolační páskou, abyste zamezili zkratu, který by mohl způsobit výbuch nebo požár.

14. NEROZEBÍREJTE. Demontáž a nesprávné opětovné sestavení mohou vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru nebo vystavením nebezpečných chemikálií z baterií. Záruka je neplatná, pokud byl přístroj nebo jeho nabíječka rozmontován nebo z něj byly odstraněny nějaké součástky. Pokud je přístroj nebo nabíječka poškozena, kontaktujte společnost Rehasport Trade s.r.o.

15. SERVIS. Pokud Wave Roller nebo nabíječka nefungují správně, pokud došlo k ostrému nárazu nebo pádu, poškození, ponechání v exteriéru nebo pádu do vody, přístroj a příslušenství nepoužívejte a kontaktujte společnost Rehasport Trade s.r.o. zasláním emailu na info@rehasport.cz ohledně opravy nebo servisu. Nepokoušejte se přístroj sami opravit nebo demontovat, riziko elektrického výboje a požáru.

16. NEPOUŽÍVEJTE PŘI KOUPÁNÍ, VE SPRŠE, VANĚ ČI UMYVADLE. Nepokládejte a neuskładňujte Wave Roller na místech na dosah vany nebo umyvadla. Nepokládejte do vody, nenechte spadnout do vody či jiné tekutiny. Nesahejte na příslušenství, které spadlo do vody, okamžitě odpojte zdroj elektrického proudu.

17. TEPLOTNÍ POJISTKA. Zabudovaná automatická teplotní pojistka předchází přehřátí a riziku vzniku požáru.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Theragun Wave Roller má záruku 2 roky. Záruka se nevztahuje na poškození, za které se považují i opravy provedené jinou osobou než oprávněným pracovníkem společnosti Theragun. Záruka se nevztahuje na nesprávné použití, běžné opotřebení, nedostatečnou údržbu a nehody způsobené pádem a podobně. Podrobné informace o záruce najdete na www.therabody.com/warranty. V případě záležitostí týkajících se záruky nás kontaktujte e-mailem na info@rehasport.cz.